

# Telo di trasferimento assorbente



## WRASFER<sup>TM</sup>


Telo di trasferimento ad alto potere assorbente

**Nuovo sistema innovativo per il trasferimento di pazienti.**

**Può essere utilizzato in tutti i casi sia necessario trasferire un paziente da una barella a un'altra, da un letto a un altro, dal pavimento alla barella, ecc.**

Il telo Wrasfer, oltre a essere molto resistente, consente di assorbire fino a 3,5 litri di essudati, garantendo quindi un ottimale contenimento delle eventuali infezioni possibili. Nasce quale risultato di uno studio per favorire il trasferimento dei pazienti in gravi condizioni di salute da parte dei soccorritori in mare e in luoghi dove l'utilizzo di altri ausili risulterebbe complicato e difficoltoso.

Il telo 2 in 1 WRASFER è un dispositivo monouso in classe di rischio 1 (secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE) ed è una soluzione efficace, igienica e resistente con il preciso compito di salvaguardare il trasferimento di pazienti fino a 150 kg e di proteggere gli operatori sanitari da eventuali contaminazioni dovute alla perdita di essudati. Studiata appositamente quale ausilio per la movimentazione di pazienti (fino a 150 kg di peso) è destinato all'utilizzo nel settore dell'emergenza sanitaria, in ospedale, nei Pronto Soccorso, nelle case di cura, nelle camere mortuarie e nel recupero di salme in condizioni particolari di utilizzo. Può essere utilizzato quale complemento di altri ausili di recupero e trasporto quali i materassi a depressione, le barelle a depressione, le barelle a cucchiaio e tipo Toboga, ecc.

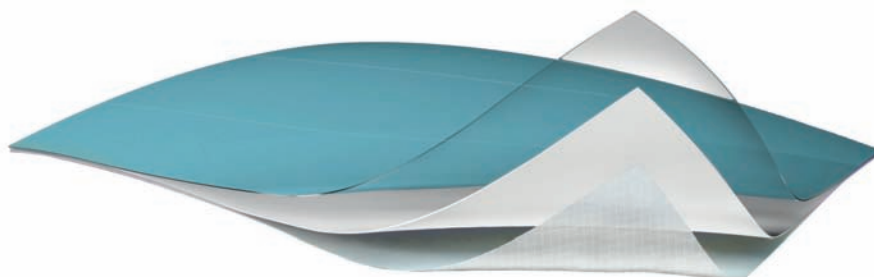

Dimensioni del telo: 220x100 cm - Dimensioni dello strato assorbente: 200x50 cm  
3 strati: polietilene, TNT e strato assorbente - Peso: 350 g - Portata massima: 150 kg  
Il dispositivo è commercializzato in forma singola non sterile e non può essere sterilizzato



Impresa dell'

**ALTO ADIGE**

## WRASFER™

Può essere utilizzato anche per il trasferimento di salme o pazienti deceduti.

Il suo utilizzo costante su lettini di trasporto e barelle (soprattutto in caso di emergenza sanitaria), consente di salvaguardare la pulizia degli stessi, risparmiare denaro ed evitare di maneggiare sostanze disinfettanti (a volte anche aggressive).

Al termine dell'utilizzo il telo va eliminato e il lettino o la barella è nuovamente pronto al riutilizzo.

**ATTENZIONE:** l'utilizzo del telo porta feriti deve prevedere almeno l'ausilio di due/quattro persone (anche a seconda del peso del paziente) e devono essere rispettate le condizioni d'uso descritte sulla confezione del dispositivo stesso. Sono disponibili video e documenti ausiliari su come utilizzare in modo corretto e sicuro il telo Wrasfer.




WRASFER™


Il telo WRASFER non può essere utilizzato come dispositivo per il trasporto di pazienti (non sostituisce barelle, lettini o altri dispositivi medici destinati a questo scopo).

 **SCAN FOR VIDEO**

### ATTENZIONE: PRESA CORRETTA PER IL SOLLEVAMENTO DEL PAZIENTE

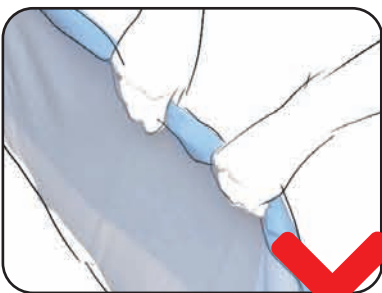

**4 OPERATORI**

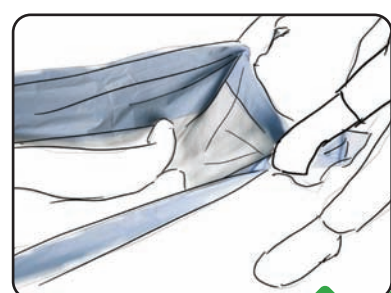

**2 OPERATORI**